


myVIBS - MANUAL DE USUARIO

CONTENT

- I. Artículos *myVIBS* suministrados
- II. Instrucciones de seguridad
- III. Funcionamiento de *myVIBS*
- IV. Manejo
- V. Limpieza y Mantenimiento
- VI. Batería
- VII. Garantía
- VIII. Protección del Medioambiente

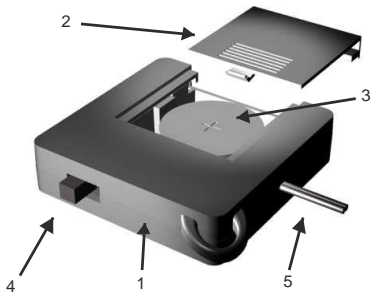

I. ARTICULOS *myVIBS* SUMINISTRADOS

- 1 Caja
- 2 Tapa cubierta de la Batería
- 3 Batería
- 4 Interruptor encendido/apagado
- 5 Cable
- 6 Embocadura vibradora
- 7 Bolsa transporte
- 8 Cinta para colgar *myVIBS*

II. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No exponga el dispositivo en temperaturas por debajo de $-5^{\circ}\text{C}/23^{\circ}\text{F}$ y superiores a $+40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$.
- Comprobar que la batería está alojada en su compartimiento en posición correcta. (Polo + queda orientado hacia arriba).


- No oprima el cable (5).
- No trate de reparar Ud. mismo el dispositivo.
- Nunca introduzca en cualquier liquido el producto *myVIBS*, puede causar un cortocircuito y destruir la electronica.

III. FUNCIONAMIENTO DE *myVIBS*

- Antes de utilizar *myVIBS* introduzca la bacteria de acuerdo al punto VI.
- La duración de la batería está sobre 6 horas dependiendo del número de encendidos y apagados que se realicen.
- El dispositivo *myVIBS* está pensado para un uso de 8/10 minutos al día.
- *myVIBS* no se desconecta nunca automáticamente, es necesario usar el conmutador 4 de encendido/apagado en la caja .

IV. MANEJO

- Ponga la embocadura 6 entre los dientes (c, d) y sus labios (a, b).
- Trate de poner la embocadura en una posición confortable, dónde no tense los músculos alrededor de los labios y donde la embocadura no toque sus dientes, trate de mantener una separación como se indica en el punto (e).
- Conecte el interruptor de encendido/ apagado.

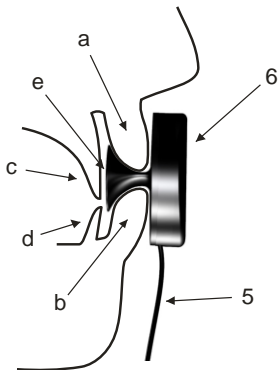

- a Labio arriba
- b Labio abajo
- c Dientes anteriores arriba
- d Dientes anteriores abajo
- e Espacio intermedio

- ***Para relajación:***

Ponga sus labios cerrados y algo de aire entre sus labios y sus dientes o como en posición de dar un beso.

- ***Para entrenamiento:***

haga los ejercicios moviendo sus labios (sonriendo/relajando) mientras *myVIBS* esta funcionando.

- Se recomienda usar *myVIBS* diariamente; Decida Ud. como lo utiliza: relajación o entrenamiento.

V. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- La embocadura puede limpiarla con un producto adecuado, toallita desinfectante, pulverizador o una toalla húmeda.
- La caja puede limpiarla con una toalla antiestática.
- Nunca ponga la embocadura dentro del agua, puede destruir el vibrador.
- Para proteger mejor *myVIBS*, utilice la bolsa adjunta para su transporte.
- Use la caja cuando no utilice *myVIBS* por largos periodos de tiempo.

VI. SUSTITUCION DE LA BATERIA

- Para sustituir la batería 3, presione con su dedo la cubierta de la batería 2 y trate de desplazarla en sentido opuesto a estar cerrada.
- Quite la batería con la ayuda de un objeto punzante.
- Ponga la nueva batería (tipo de batería: CR2450) asegurándose que el polo+ está mirando hacia arriba y presione la batería hasta que quede fijada dentro de la caja 1.
- Finalmente cierre la cubierta de la batería con cuidado y presione en la zona marcada hasta que esté cerrada la tapa.

VII. GARANTIA

- *myVIBS* tiene 1 año de garantía en el material que pueda venir defectuoso de fábrica, empezando la garantía el día de la compra del producto.
- Para hacer uso de la garantía es necesario escribir con detalle y explicando el defecto a:
costumer@myvibs.com
- Las comunicaciones verbales o por teléfono no serán suficientes.
- La batería está excluida de la garantía.

- La garantía estará invalidada en los casos siguientes:
 - Por el uso inapropiado del dispositivo
 - Por una reparación en tienda no autorizada.
 - La ejecución de la garantía solo será aceptada por el comprador del dispositivo

VIII. PROTECCION DEL MEDIOAMBIENTE

- Las pilas usadas deben eliminarse a través de contenedores de recogida señalados a tal efecto.
- Nunca ponga la batería en la basura.
- Deseche el aparato *myVIBS* según Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos electrónicos.
- Para más información contacte con la autoridad municipal competente en materia de residuos.





myVIBS
Never forget me!

INEXPIM S.L.
Antonia Merce, 2
28009 Madrid/Spain

www.myvibs.es