


myVIBS - BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALT

- I. Komponenten von *myVIBS*
- II. Sicherheitshinweise
- III. Betrieb von *myVIBS*
- IV. Benutzungshinweise
- V. Reinigung und Wartung
- VI. Einsetzen und Austausch der Batterie
- VII. Gewährleistung
- VIII. Schutz der Umwelt

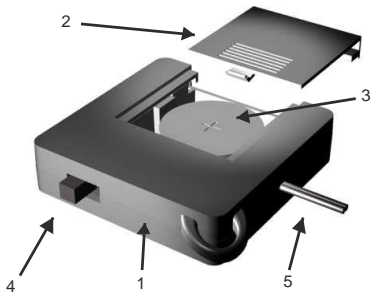

I. KOMPONENTEN VON *myVIBS*

- 1 Elektronikgehäuse
- 2 Batteriedeckel
- 3 Batterie
- 4 Ein-/Aus-Schalter
- 5 Kabel
- 6 Vibrationsmundstück
- 7 Transporttasche
- 8 Umhängeband mit Karabinerhaken
(nicht gezeigt)

II. SICHERHEITSHINWEISE

- Setzen Sie das Gerät nicht längere Zeit Temperaturen unter $-5^{\circ}\text{C}/23^{\circ}\text{F}$ oder über $+40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$ aus.
- Prüfen Sie, ob die Batterie in der richtigen Position eingesetzt ist (+ muß oben sein).
- Quetschen Sie nicht das Kabel (5).


- Versuchen sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
- Tauchen Sie niemals eine Komponente des Geräts in eine Flüssigkeit ein, da dies einen Kurzschluss verursachen kann und die Elektronik zerstört.

III. INBETRIEBNAHME / BETRIEB VON *myVIBS*

- Setzen Sie bitte vor Inbetriebnahme die mitgelieferte Knopf-Batterie gemäß VI in das Batteriefach ein.
- Die Batterie-Lebenszeit beträgt ca. 6 Stunden. Die Anzahl der ein-/Ausschaltzyklen kann jedoch die Lebensdauer der Batterie (3) verkürzen).
- Es wird empfohlen, *myVIBS* etwa 8-10 Minuten/Tag zu verwenden.
- *myVIBS* schaltet nicht automatisch ab: es ist notwendig, das Gerät mit dem Schalter (4) am Elektronik-Gehäuse manuell ein- und auszuschalten.

IV. BENUTZUNGSHINWEISE

- Nehmen Sie das Mundstück (6) vor den Zähnen (c, d) zwischen die Lippen (a, b).
- Versuchen Sie für das Mundstück eine komfortable Position zu finden, wo es die Mundmuskeln nicht zu sehr anspannt und wo es nicht die Zähne berührt, d.h. versuchen Sie einen Trennspace (e) aufrecht zu erhalten, eventuell indem sie die Lippen leicht nach vorne stülpen.

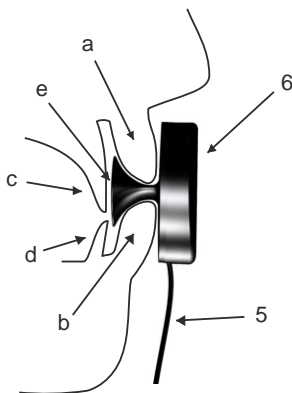

- a Oberlippe
b Unterlippe
c obere Vorderzähne
d untere Vorderzähne
e Trennspace

- Schalten Sie dann das Gerät ein.
- **Zur Entspannung**, halten Sie die Lippen geschlossen und halten Sie den Trennsplatt zwischen Zähnen und dem Mundstück aufrecht (formen Sie evtl. die Lippen zu einem Kussmund).
- **Zum Training**, versuchen Sie mit den Lippen Übungen/Lippengymnastik zu machen (z.B. Lächel/Entspannungs-Zyklen) während Sie das eingeschaltete *myVIBS* zwischen den Lippen halten.
- Wir empfehlen, *myVIBS* täglich zu benutzen; entscheiden Sie selbst, was Sie benötigen: Entspannung oder Training der Lippen.

V. REINIGUNG UND WARTUNG

- Sie können das Mundstück mit angemessenen Produkten reinigen, z.B. mit einem mit Flüssigseife getränkten Tuch und mit Erfrischungs- oder Desinfektionstüchern.
- Das Elektronikgehäuse kann mit einem Antistatiktuch gereinigt werden.
- Tauchen Sie das Mundstück niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit, da dies die Vibrator-Elektronik zerstört.
- Um *myVIBS* vor mechanischen Schäden zu bewahren, benutzen sie bitte die Tasche, die im Präsentationskästchen mitgeliefert wird.
- Benutzen Sie das Präsentationskästchen zur Aufbewahrung, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden.

VI. EINSETZEN UND AUSTAUSCH DER BATTERIE

- Um die Batterie 3 auszutauschen, öffnen Sie den Batteriedeckel 2 (drücken Sie mit einem Finger auf die markierte Stelle des Batteriedeckels 2 und schieben Sie den Deckel vorsichtig entlang der Führungsschiene zur Außenseite des Gehäuses).
- Entfernen Sie die alte Batterie mit einem Fingernagel/einem Kugelschreiber/einem Schraubenzieher.
- Setzen sie die neue Batterie (Batterietyp: CR2450) so ein, dass der + Pol oben ist (d.h. zur Gehäuseaußenseite zeigt) und drücken Sie die Batterie so fest, dass sie innerhalb des Gehäuses zwischen den elektrischen Kontakten fixiert ist.
- Schließen sie dann den Batteriedeckel wieder vorsichtig und lassen sie den Schnapper des Deckels bei leichtem Druck auf die markierte Stelle einrasten.

VII. GEWÄHRLEISTUNG

- *myVIBS* hat vom Zeitpunkt de Verkaufs an 1 Jahr Gewährleistung auf Material, das nachweislich einen Fabrikationsfehler aufweist.
- Um die Gewährleistung in Anspruch zu nehmen ist es notwendig, eine Mitteilung mit den Einzelheiten des Mangels an folgende Adresse zu senden: costumer@myvibs.com
- Mündliche oder telefonische Mitteilungen sind nicht ausreichend.
- Die Gewährleistung gilt ausdrücklich nur für den Erstkäufer.
- Die Batterie ist von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- In folgenden Fällen ist die Gewährleistung ausgeschlossen:
 - Der Schaden wurde durch unsachgemäße Verwendung verursacht.
 - Reparaturen wurden von einer nicht autorisierten Werkstatt durchgeführt.

VIII. SCHUTZ DER UMWELT / ENTSORGUNG

- Bitte entsorgen Sie das *myVIBS*-Gerät entsprechend der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC für Elektro- und Elektronikaltgeräte.
- Werfen Sie niemals die Batterie in den Hausmüll.
- Die gebrauchten und entladenen Batterien sind über die speziell gekennzeichneten Sammelbehälter, die Sondermüllannahmestellen oder über einen Elektrohändler zu entsorgen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Batterien zu entsorgen.
- Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.





myVIBS
Never forget me!

INEXPIM S.L.
Antonia Merce, 2
28009 Madrid/Spainen

www.myvibs.de